


OPERACIÓN

FUNCIÓN DE CINCO VELOCIDADES

Presione el botón para encender el cepillo de dientes, presione continuamente el botón de encendido dentro de los 5 segundos para cambiar de marcha y seleccione diferentes modos de función con un botón. La secuencia de funciones de este botón es: encender (primer cepillado del día) - último cepillado del día - protector bucal suave - blanqueamiento - modo de masaje - Apagado (después de 5 segundos de trabajo continuo, presione el botón para apagar o presione y mantenga presionado el botón durante más de 1 segundo para apagar).

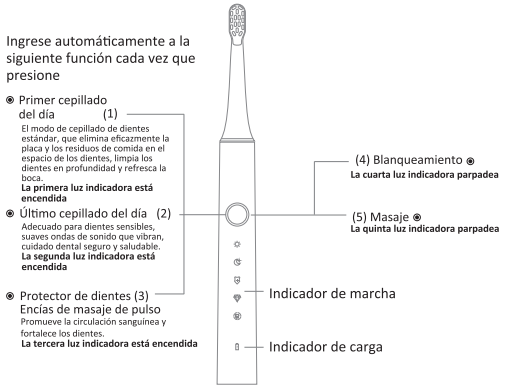


RECORDATORIO DE 30 SEGUNDOS

Al trabajar en cada marcha, el sistema se detendrá automáticamente durante un breve período de tiempo cada 30 segundos antes de continuar trabajando para recordarle al usuario que debe cambiar la parte de cepillado.

APAGADO EN 2 MINUTOS

Según la recomendación del dentista, la duración de cada cepillado no debe ser menor a 2 minutos y el sistema se apagará automáticamente después de 2 minutos. Si necesita continuar usándolo, puede volver a encender el botón para continuar usándolo.

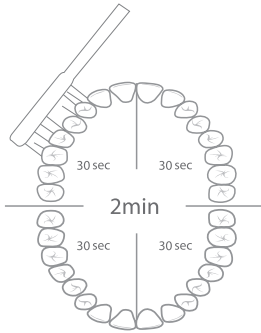

MEMORIA INTELIGENTE

Para satisfacer los hábitos de uso del usuario, el sistema memorizará automáticamente los hábitos de uso de su equipo, de modo que pueda encender su equipo funcional de forma predeterminada la próxima vez que lo use.

GUÍA DE OPERACIÓN

MÉTODO DE CARGA

1. Para el primer uso, utilice su propia energía y luego cárguela hasta que la luz indique que está llena. Tarda de 3 a 4 horas en cargarse por completo.



2. La luz roja parpadea durante la carga y la luz verde permanece encendida cuando está completamente cargada.
3. Cuando el nivel de la batería es inferior al 20%, la luz roja sigue parpadeando y puede cepillarse los dientes normalmente.
4. Protección de batería baja, cuando la batería está casi agotada, la luz roja parpadea 5 veces para apagarse.

* ACERCA DEL CABEZAL DEL CEPILLO *

1. Saque la máquina y el cabezal del cepillo, sujete el mango con la mano derecha e inserte el cabezal del cepillo en el eje de salida del cepillo de dientes a 135° con la mano izquierda, y luego gire con cuidado el cabezal del cepillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las cerdas y la máquina estén al mismo nivel.
2. Cuando retire o reemplace el cabezal del cepillo, primero gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj en un ángulo de 45° y luego retírelo con cuidado.
3. Si está acostumbrado a los usuarios zurdos, la acción de la operación es la contraria. Si tiene alguna pregunta, consulte el servicio de atención al cliente en línea o llame al personal de servicio posventa.

* El dentista recomienda reemplazar la cabeza del cepillo cada 3 meses.

PASOS DE USO DIARIO

1. Para evitar que la pasta de dientes salpique, coloque una pequeña cantidad de pasta de dientes en el cabezal del cepillo antes de usarla, empápele antes de ponerla en la boca y luego encienda el cepillo de dientes. (Como se muestra en la Imagen 1)
2. Las cerdas mueven el cepillo de dientes lentamente a 45 grados en la línea de las encías. (Como se muestra en la Imagen 2)



3. Sostenga suavemente el cuerpo del cepillo de dientes y muévalo lentamente con un movimiento circular. No lo presione ni lo frote con demasiada fuerza.
4. Después de cepillarse, enjuáguese la boca con agua.

RECORDATORIO

1. Cuando se cepille los dientes, coloque suavemente las cerdas en la unión entre los dientes y las encías, y use la vibración de alta frecuencia de las cerdas para limpiar. Cambie de posición después de unos segundos y no se pierda las esquinas muertas de la boca. (No apriete ni limpie con fuerza, esto no logrará el efecto de limpieza y las cerdas se deformarán fácilmente).



3. Al limpiar, primero apague la máquina, puede enjuagar el mango y el cabezal del cepillo de dientes con agua (no sumerja la máquina en agua durante mucho tiempo y no use agua superior a 40 °C para limpiar), golpee ligeramente el cabezal del cepillo de dientes, asegúrese de que no haya residuos en las cerdas, seque el cepillo y colóquelo en un lugar ventilado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
Solo disponible durante unos minutos incluso después de la carga	Tiempo de carga insuficiente / fin de la vida útil de la batería	Cargue por más de 2 horas / póngase en contacto con el servicio de posventa
La luz indicadora no se enciende	El cepillo de dientes se acaba de comprar o no se ha utilizado durante mucho tiempo	Cuando comienza la carga, es posible que la luz indicadora del cepillo de dientes no parpadee ni se encienda durante unos minutos
La intensidad de la vibración disminuye repentinamente	Presiona el cepillo de dientes con demasiada fuerza sobre los dientes al cepillarse	Coloque el cepillo de dientes suavemente contra los dientes al cepillarse

1. La garantía del producto se implementará a partir de la fecha de compra.
2. Los productos básicos dentro del período de garantía solo se pueden reparar en lugares identificados por nosotros; Durante el período de garantía, se deberá presentar este certificado de garantía y el comprobante de compra. Atención especial: el certificado de garantía no se emitirá después de que se pierda, consérvelo correctamente;
3. En el siguiente período a partir de la fecha de compra, se llevarán a cabo reparaciones en caso de falla durante el uso normal.
4. En una de las siguientes situaciones, incluso durante el período de garantía, no puede tratarse como garantía, pero las reparaciones se pueden realizar por una tarifa:
 - 1) La fecha de compra es superior a un año;
 - 2) Sin certificado de garantía;
 - 3) Fallas causadas por fuerza mayor (factores externos como incendio, terremoto, tifón, inundación o guerra);
 - 4) Daños en la apariencia como rayones y manchas durante el uso;
 - 5) Fallos causados por autodescomposición, desmontaje y reparación incorrecta;
 - 6) Pérdida de accesorios distintos del cuerpo principal;
 - 7) Fallos causados por el uso fuera del hogar en general (como en actividades comerciales).

TARJETA DE GARANTÍA POSTVENTA

Fecha	
Personal de mantenimiento	
Contenido de falla	
Reparar contenido	
Fecha de entrega:	Firma:

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



MANUAL DE USUARIO



CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO
CDE4000

WATER04X