

1, Esquema del producto	
1.1 Descripción del instrumento	2
1.2 Detalles de empaque	2
2, Elaboración de principios	2
3, Tabú del uso	2
4, Medidas de seguridad	3
5, Empezando	
5.1 Preparación de uso	3
5.2 Siga los pasos	4
5.3 Detección de piel	6
5.4 Fin de uso	6
5.5 Guardar limpio	6
6, Solución de problemas	7
7, Especificaciones del producto	9
8, Descargo de responsabilidad	10
9, Tarjeta de servicio Post-venta	11

1. Esquema del Producto


1.1 Descripción del Instrumento

(1) Dispositivo de depilación de belleza (2) Superficie de contacto con la piel (3) Luces de intensidad (1-5) (4) Interruptor de encendido / ajuste de intensidad (5) Botón de disparo del flash (6) Puerto de acceso a la energía (7) Filtro

1.2 Detalles de empaque

Abra la caja exterior y la caja interior, encontrará los siguientes objetos

◆ Instrumento de depilación de belleza ◆ Tarjeta calificada / de garantía ◆ Convertidor de potencia ◆ Manual de instrucciones



2. Elaboración de principios

El instrumento adopta la tecnología IPL de belleza fotónica avanzada internacional, que utiliza luz pulsada intensa para iluminar la piel directamente, producir un efecto bioquímico ligero, por un lado, puede hacer que el colágeno de la piel y la fibra elástica se regeneren para reorganizar, restaurar la elasticidad de la piel y mejorar la microcirculación facial, eliminar o reducir las arrugas; La luz pulsada intensa penetra en la piel, por otro lado, se organizan en grupo de pigmentos y absorción selectiva de prioridad capilar, energía térmica sin destruir la premisa del tejido cutáneo normal, coagulación sanguínea, regimiento destruido por descomposición térmica del pigmento y tratan la expansión de los capilares, eliminar las manchas y hacer la eliminación del exceso de vello.

3. Tabú del Uso

La eliminación no es adecuada para ninguna persona, consulte la siguiente información detallada antes de su uso:

Nunca use el instrumento si tiene el tipo de piel VI en (figura de contraste de color) (Página 2). En este caso, corre un alto riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, como hiperpigmentación e hipopigmentación, enrojecimiento intenso o quemaduras.

I Blanco

II Amarillo

III Marrón claro

IV Marrón medio

V Marrón oscuro

VI Negro pardusco o más oscuro

No utilice nunca el instrumento si está embarazada o amamantando, ya que el dispositivo no se probó en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

No utilice nunca el instrumento si padece alguna de las enfermedades que se listan a continuación:

- Si tiene una enfermedad de la piel como cáncer de piel activo, tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro cáncer localizado en las áreas a tratar.
- Si tiene antecedentes de trastornos del colágeno, incluidos antecedentes de formación de cicatrices queloides o antecedentes de cicatrización deficiente de heridas.
- Si tiene antecedentes de trastornos vasculares, como la presencia de varices o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si su piel es sensible a la luz y desarrolla fácilmente una erupción o una reacción alérgica.
- Si tiene infecciones, eccemas, quemaduras, inflamación de folículos pilosos, laceraciones abiertas, abrasiones, herpes simple, heridas o lesiones o hematomas en las zonas a tratar.
- Si ha sido operado en las zonas a tratar en las últimas tres semanas.
- Si tiene diabetes, lupus eritematoso, porfiria o enfermedad cardíaca congestiva.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunosupresora (incluida la infección por VIH o SIDA).
- Si ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses.

Nunca use el instrumento si toma alguno de los medicamentos que se listan a continuación:

- Si su piel está siendo tratada actualmente o ha sido tratada recientemente en la última semana con Alpha - Hidroxiácidos (AHA), Betahidroxiácidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado alguna forma de isotretinoína acutane o roaccutane en los últimos seis meses. Este tratamiento puede hacer que la piel sea más susceptible a desgarros, heridas e irritaciones.
- Si toma medicamentos para la anticoagulación, incluido el uso intensivo de aspirina, de una manera que no permita un período de lavado mínimo de 1 semana antes de cada tratamiento.
- Si está tomando fotosensibilizantes o medicamentos, revise el prospecto de su medicamento y nunca use el dispositivo si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, reacciones fototóxicas o si debe evitar el sol al tomar este instrumento.

Nunca use el instrumento en las siguientes áreas:

- Alrededor de los ojos y cerca de las cejas.
- En pezones, areolas, labios menores, vagina, ano y el interior de las fosas nasales y oídos.
- Los hombres no deben usarlo en la cara y en el escroto.
- Sobre y cerca de cualquier objeto artificial como implantes de silicona, marcapasos, puertos de inyección subcutánea (dispensador de insulina) o perforaciones.
- Nunca use el instrumento sobre piel quemada por el sol, recientemente bronceada o con un bronceado falso.


Nota: Esta lista no es exhaustiva, si no está seguro de poder utilizar el instrumento, le recomendamos que consulte a un médico.

4. Medidas de Seguridad


- Nunca inserte ningún objeto en el instrumento.
- Por razones de higiene, el instrumento solo debe ser utilizado por una persona.
- Utilice el instrumento únicamente para el propósito para el que fue diseñado, como se muestra en el manual del usuario.
- Mantenga el instrumento y el adaptador secos, no son lavables.
- Este instrumento no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Siempre revise el instrumento antes de usarlo. No utilice el instrumento o el adaptador si está dañado.

5. Empezando

5. 1 Preparación de Uso




1. Debe acariciar su piel quitando el vello de la superficie de su piel. Esto permite que la luz sea absorbida por las partes del cabello debajo de la superficie de la piel para asegurar un tratamiento efectivo.

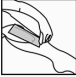

2. Limpie su piel y asegúrese de que esté libre de vello, completamente seca y libre de sustancias grasas.


5. 2 Siga los pasos

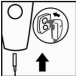

1. Con un paño suave para limpiar la piel que entra en contacto con la superficie y el filtro, déjelo secar.


2. Conecte el adaptador de corriente, las luces de intensidad son azules, el circuito del instrumento es normal.

3. Presione el interruptor de encendido, la intensidad de la luz roja parpadeante, el instrumento se inicia.

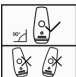


4. Si la luz indicadora de intensidad está siempre verde, el instrumento está "listo para el uso" (en caso de que la luz interior sea insuficiente, use gafas de sol para reducir el deslumbramiento del flash).

5. Superficie de contacto con un ángulo de 90° sobre la piel, para asegurar un contacto completo con la piel.




6. El indicador de intensidad se vuelve violeta y el instrumento está listo para parpadear. Si el indicador de intensidad no cambia, consulte la sección Solución de problemas de este manual.

7. Cuando presiona el "botón de flash", el instrumento parpadeará una vez, acompañado de un suave crujido, luego sentirá el flash simultáneamente con una sensación cálida.



8. Mueva el instrumento a la siguiente parte del área de depilación. Cuando el instrumento completa el suministro de energía intermitente, la luz purpura "Listo para el flash" se encenderá de nuevo y se presionará el botón intermitente.

9. Siga los pasos anteriores para completar el ciclo, puede elegir el sitio para el tratamiento de depilación.



10. Mantenga el flash lo más cerca posible del área donde se trató previamente para asegurarse de que todas las áreas se manipulen adecuadamente.

11. Después de su uso, apague el instrumento y apague la alimentación, de acuerdo con 5.5 "guardar limpio" la implementación.

Dos modos de tratamiento: (Sello y Flash) y (Deslizar y Flash), para un uso más conveniente en diferentes áreas del cuerpo:

(Sello y flash): el modo es ideal para tratar áreas pequeñas o con curvas, como las rodillas y las axilas. Simplemente presione y suelte el botón de flash para lanzar un solo flash.

(Deslizar y flash): el modo ofrece un uso conveniente en áreas más grandes como piernas. Mantenga presionado el botón de flash mientras desliza el instrumento sobre su piel para liberar varios flashes seguidos.

Tabla de referencia del ciclo terapéutico

1-4 semanas	5-6 semanas	7-8 semanas	Más de 8 semanas
2-3 veces a la semana Más del 75% del cabello comenzó a caer de forma natural.	2 veces a la semana Pérdida de cabello e inhibición del crecimiento del recién nacido.	1 vez a la semana El cabello se adelgaza menos, ya no rebota.	2 semanas 1 a 2 veces Según el estado del cabello, el uso selectivo.

El tiempo entre tratamientos puede variar según el recrecimiento de su cabello individual y también en diferentes áreas del cuerpo.

5.3 Detección de piel


Cuando lo use por primera vez o después del bronceado, realice una prueba cutánea en cada área a tratar. La prueba cutánea es necesaria para comprobar la reacción de su piel al tratamiento y para determinar el ajuste de intensidad de luz correcto para cada zona del cuerpo.

1. Elija un área cercana al área que desea tratar.
2. Encienda el instrumento. Asegúrese de seleccionar la configuración I.
3. Coloque el instrumento contra su piel y presione el botón de flash para lanzar un flash.
4. Deslice el instrumento sobre la piel hasta la siguiente zona a tratar.
5. Aumente la configuración en un nivel, aplique un flash y deslice el instrumento a la siguiente área. Repita esto para todos los niveles dentro del rango recomendado para su tipo de piel.
6. Después de la prueba cutánea, espere 24 horas y revise su piel para ver si tiene alguna reacción. Si su piel muestra reacciones, elija la configuración más alta que no haya provocado ninguna reacción en la piel para su uso posterior.

5.4 Fin de uso

- Su piel puede mostrar un ligero enrojecimiento y puede sentir picazón, hormigueo o sensación de calor. Esta reacción es absolutamente inofensiva y desaparece rápidamente.
- Puede aplicar con seguridad lociones, cremas, desodorantes, humectantes o cosméticos en las áreas tratadas. Si experimenta irritación de la piel o enrojecimiento de la piel después del tratamiento, espere hasta que desaparezca antes de aplicar cualquier producto en su piel. Si experimenta irritación de la piel después de aplicar un producto en la piel, lávela con agua.

5.5 Guardar limpio



1. Después de su uso, apague el dispositivo, desenchúfelo y déjelo enfriar.
2. Humedezca un paño suave con unas gotas de agua y utilícelo para limpiar las siguientes partes:
 - Filtro de 530nm
 - Superficie de contacto con la piel
3. Almacene el instrumento en un lugar seco y sin polvo a una temperatura entre 0°C y 60°C.

6. Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con el producto. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, comuníquese con el centro de atención al cliente de su país.

Problema	Causa posible	Solución
El dispositivo / adaptador se calienta durante el uso.	Esto es normal.	No se requiere acción.
La luz "Listo para el flash" no se enciende cuando coloco el accesorio en mi piel, pero el ventilador de enfriamiento funciona.	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Cuando se activa la protección contra sobrecalentamiento, el ventilador sigue funcionando. No apague el dispositivo, déjelo enfriar durante aprox. 15 minutos antes de continuar usándolo.
La luz de "listo para el flash" se enciende en violeta pero el dispositivo no produce un flash cuando presiono el botón de flash.	Es necesario reiniciar el dispositivo.	Para reiniciar el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo.
No puedo aumentar ni disminuir los ajustes de intensidad de la luz. Todas las luces de intensidad parpadean alternativamente.	Es necesario reiniciar el dispositivo.	Para reiniciar el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo.
El dispositivo produce un olor extraño.	El accesorio o el cristal del filtro están sucios.	Limpiar el accesorio con cuidado. Filtro están sucios.
	No se ha eliminado el vello en el que debe tratarse correctamente. Estos pelos pueden quemarse y causar el olor.	Trate previamente su piel antes de usar el dispositivo.

Problema

La piel se siente más sensible de lo habitual durante el tratamiento. Experimento una sensación de dolor inaceptable cuando utilizo el dispositivo.

Causa posible	Solución
El ajuste de intensidad de luz que usa es demasiado alto.	Compruebe si ha seleccionado el ajuste de intensidad de luz correcto. Si es necesario, seleccione un ajuste más bajo.
No eliminó los pelos de las zonas a tratar.	Trate previamente su piel antes de usar el dispositivo.
El filtro UV de la ventana de salida de luz está roto.	Si el filtro UV está roto, no use más el dispositivo. Póngase en contacto con el centro de atención al consumidor de su país, su distribuidor o centro de servicio.
Trato un área para la que el dispositivo no está diseñado o el aparato no es adecuado para el color de la piel.	Nunca use el dispositivo en las siguientes áreas: la cara, labios internos, ano, pezones, areolas, labios, dentro de las fosas nasales y oídos, alrededor de los ojos y cerca de las cejas. Los hombres no deben usarlo en la cara, el cuello o el escroto.
El dispositivo no es adecuado para su piel.	No utilice el dispositivo si tiene el tipo de piel VI o V, un tono de piel negro pardusco o más oscuro.
La reacción cutánea después del tratamiento dura más de lo habitual.	Seleccione una intensidad más baja la próxima vez. Consulte el capítulo "Uso de su dispositivo, sección Detección de piel".
Los resultados del tratamiento no son satisfactorios.	Seleccione una configuración más alta la próxima vez.
	Tiene que lanzar los flashes uno cerca del otro.
No proyectó un área adyacente a un área que trató antes.	Si tiene el cabello rubio claro, rubio o peltirjo, el tratamiento no es efectivo.
El dispositivo no es eficaz en el color del vello corporal.	Para eliminar todo el vello con éxito, le recomendamos que siga el programa de tratamiento recomendado. Puede reducir el tiempo entre tratamientos, pero no trate más de una vez cada dos semanas.
No utiliza el aparato con la frecuencia recomendada.	Continúe usando el dispositivo durante al menos 6 meses, ya que el crecimiento del cabello aún puede disminuir en el transcurso de este período.
Usted responde más lentamente al tratamiento con IPL.	El accesorio para el cuerpo no contiene vidrio / filtro / ventana.
El accesorio de mi cuerpo no tiene un vidrio / filtro / ventana integrados.	Esto es normal.

7. Especificaciones del Producto

Principio del instrumento	Instrumento de depilación IPL
Peso neto del instrumento 2	60g
Área de irradiación	3cm2
Espectro del instrumento	≥530nm
Voltaje nominal	100V - 240V
Condiciones de operación	Temperatura: + 10°C a 35°C
	Humedad: 30% a 75%

8. Descargo de Responsabilidad

Desde la fecha de compra, el período de garantía de la máquina de 12 meses pertenece a una de las siguientes circunstancias, incluso en el período de garantía, no se puede tratar con garantía:

1. No seguir las instrucciones, operación, mantenimiento, mantenimiento del producto dañado.
2. El uso de errores a medio camino (lavado, inundación, etc.) provoca daños en el producto.
3. Exceder el entorno de uso permitido (como alta temperatura, corrosión, etc.) puede dañar el producto.
4. Una fuerza externa anormal (calda, extrusión, impacto, etc.) daña el producto.
5. Las causas de fuerza mayor natural (fuego, inundación, rayos, etc.) provocan daños en el producto.
6. No uso de no fabricantes para proporcionar accesorios y piezas de expansión causadas por daños al producto.

Prevalecerá la lista anterior, si hubiera algún cambio, a las nuevas disposiciones de la empresa o las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos nacionales actualizados.

Tarjeta de servicio post - venta

Estimado cliente

Gracias por elegir nuestros productos, permítanos tener la oportunidad de brindarle un servicio de la mejor calidad, para que nuestro servicio sea más satisfactorio para usted después de la compra, lea atentamente las instrucciones y conserve la tarjeta de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo, ¡trabajaremos para usted lo antes posible!

1. Por ejemplo, los problemas de calidad causados por los productos no se pueden utilizar normalmente, por favor compre rápidamente sus productos y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de posventa de los proveedores para brindarle el servicio de posventa.
2. No aceptamos ningún correo y flete a pagar, por servicio al cliente especializado para comunicarse con usted y resolver problemas de envío.
3. Por favor, tenga paciencia para completar la tarjeta de garantía del servicio postventa, y con la mercancía enviada de vuelta y conveniente para que la manejemos lo antes posible, gracias.

Nombre real: (Requerido) _____ Número de contacto: (Requerido) _____

Canal de compra: _____ Cuenta de compra: _____

Número de pedido: S _____ Selección del mercado de accesorios: (Obligatorio) ☐ Devolución en buen estado ☐ Bienes de cambio

Dirección de entrega: (obligatorio) _____

Política de devolución: _____

Nuestras sugerencias: _____

6

7

8

9

10

11