

MAWe
by GADNIC

MASAJEADOR DE
LACTANCIA MATERNA



MANUAL DE USUARIO

BEBE0157

INDICE

ESPAÑOL.....	05
PORTUGUÊS.....	09
ENGLISH.....	13

MANUAL DE USUARIO


MASAJEADOR PARA LACTANCIA

BEBE0157



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS


CÓMO USAR

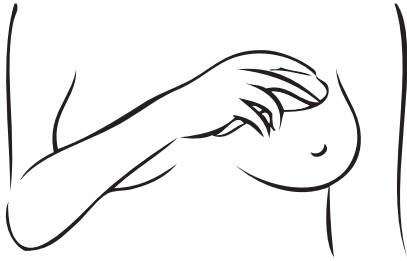

Técnica de masaje: Utilice la almohadilla de masaje para frotar suavemente el pecho en dirección al pezón. Esto ayuda a estimular el flujo de leche y a aliviar la congestión mamaria.



Posicionamiento: Coloque la almohadilla de masaje debajo del pecho y masajee hacia arriba, en dirección al pezón.

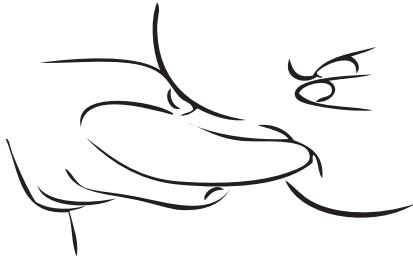

Movimiento suave: utilice el extremo más estrecho del masajeador para realizar movimientos circulares suaves en las zonas sensibles.



Alivio de conductos obstruidos: aplique una ligera presión con el extremo estrecho en las zonas con conductos obstruidos para ayudar a liberar los bloqueos.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Cargue completamente el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.
2. Utilice únicamente el cable de carga USB incluido. El uso de otros cables puede dañar el dispositivo o su circuito.
3. Límpielo únicamente con un paño suave y húmedo.
4. Guárdelo y cárguelo a temperatura ambiente. No utilice ni cargue el masajeador si ha estado expuesto a calor externo (por ejemplo, si se ha dejado en un coche caliente o bajo la luz solar directa).
5. Mantenga el dispositivo y el manual en un lugar seco y ventilado.
6. Evite exponer el masajeador a altas temperaturas o dejarlo en ambientes calientes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL	Silicona líquida con tacto suave
FUNCIONES	Vibración y Calor
TAMAÑO	51x25x110mm
ÍNDICE DE IMPERMEABILIDAD	IPX7 (resistente al agua)
MODOS DE VIBRACION	10 opciones de frecuencia
AJUSTE DE CALENTAMIENTO	3 niveles de calor (45°C - 55°C)
METODO DE CARGA	Carga USB CC
VIDA UTIL	Hasta 1 hora por carga

FUNCIONES DE LOS BOTONES

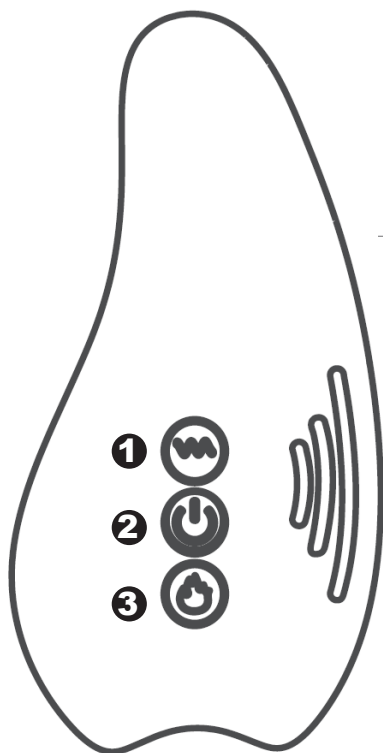

- 1** Botón de vibración
 - Mantén presionado durante 2 segundos para activar la vibración.
 - Presiona brevemente para cambiar entre los modos de vibración.
 - Mantén presionado de nuevo para desactivarlo.
- 2** Botón de encendido (On/Off)
 - Manténgalo presionado durante 2 segundos para encender o apagar.
 - Presione brevemente para alternar entre los ajustes disponibles.
- 3** Botón de calor
 - Presione brevemente una vez para seleccionar calor bajo.
 - Presione dos veces para activar el calor medio.
 - Presione tres veces para activar el calor alto.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su masajeador de lactancia.

MANUAL DO USUÁRIO

MASSAJADOR PARA LACTAÇÃO

BEBE0157



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.


CÓMO USAR



Técnica de massagem: Use a almofada de massagem para esfregar suavemente o peito em direção ao mamilo. Isso ajuda a estimular o fluxo de leite e a aliviar a congestão mamária.



Posicionamento: Coloque a almofada de massagem sob o peito e massageie para cima, em direção ao mamilo.

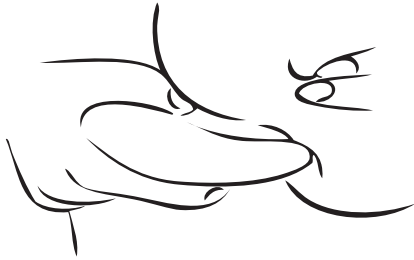

Movimento suave: utilize a extremidade mais estreita do massageador para realizar movimentos circulares suaves nas zonas sensíveis.



Movimento suave: utilize a extremidade mais estreita do massageador para realizar movimentos circulares suaves nas zonas sensíveis.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Carregue completamente o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez.
2. Utilize apenas o cabo de carregamento USB incluído. A utilização de outros cabos pode danificar o dispositivo ou o seu circuito.
3. Limpe-o apenas com um pano macio e húmido.
4. Guarde-o e carregue-o à temperatura ambiente. Não utilize nem carregue o massageador se tiver sido exposto a calor externo (por exemplo, se tiver sido deixado num carro quente ou sob luz solar direta).
5. Mantenha o dispositivo e o manual num local seco e ventilado.
6. Evite expor o massageador a altas temperaturas ou deixá-lo em ambientes quentes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MATERIAL	Silicone líquido com toque suave
FUNÇÕES	Vibração e calor
TAMANHO	51x25x110mm
ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE	IPX7 (resistente à água)
MODOS DE VIBRAÇÃO	10 opções de frequência
AJUSTE DE AQUECIMENTO	3 níveis de calor (45 °C - 55 °C)
METODO DE CARGA	Carregamento USB CC
VIDA ÚTIL	Até 1 hora por carga

FUNÇÕES DOS BOTÕES

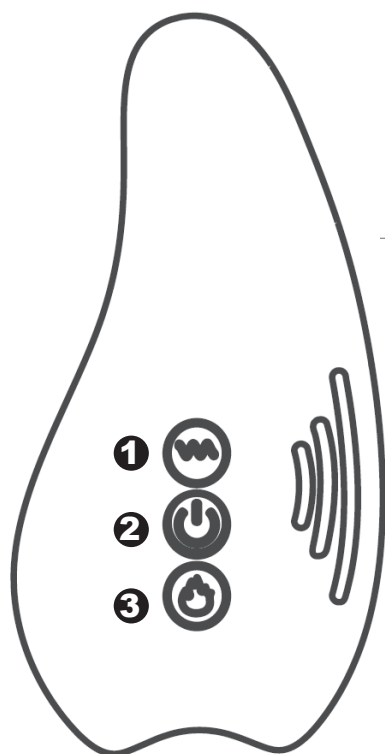

- 1** Botão de vibração
 - Mantenha pressionado por 2 segundos para ativar a vibração.
 - Pressione brevemente para alternar entre os modos de vibração.
 - Mantenha pressionado novamente para desativar.
- 2** Botão liga/desliga
 - Mantenha pressionado por 2 segundos para ligar ou desligar.
 - Pressione brevemente para alternar entre as configurações disponíveis.
- 3** Botão de calor
 - Pressione brevemente uma vez para selecionar calor baixo.
 - Pressione duas vezes para ativar o calor médio.
 - Pressione três vezes para ativar o calor alto.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu massagador de lactação.

USER MANUAL


LACTATION MASSAGER

BEBE0157



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.


HOW TO USE

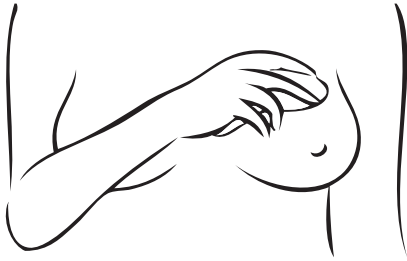

Massage technique: Use the massage pad to gently rub the breast toward the nipple. This helps stimulate milk flow and relieve breast engorgement.



Positioning: Place the massage pad under the breast and massage upward toward the nipple.

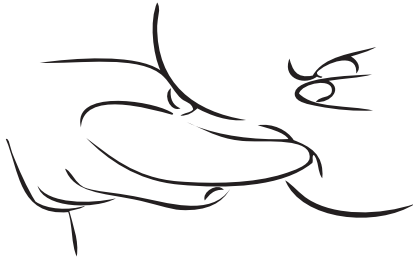

Gentle movement: Use the narrower end of the massager to make gentle circular movements on sensitive areas.



Relief for blocked ducts: Apply gentle pressure with the narrow end to areas with blocked ducts to help release blockages.


SAFETY PRECAUTIONS

1. Fully charge the device before using it for the first time.
2. Only use the included USB charging cable. Using other cables may damage the device or its circuitry.
3. Only clean it with a soft, damp cloth.
4. Store and charge at room temperature. Do not use or charge the massager if it has been exposed to external heat (e.g., left in a hot car or in direct sunlight).
5. Keep the device and manual in a dry, well-ventilated place.
6. Avoid exposing the massager to high temperatures or leaving it in hot environments.

PRODUCT FEATURES

MATERIAL	Liquid Silicone with Soft Touch
FUNCTIONS	Heat and Vibration
SIZE	51x25x110mm
WATERPROOF RATING	IPX7 (waterproof)
VIBRATION MODES	10 Frequency Options
HEATING SETTINGS	3 Heat Levels (45°C - 55°C)
CHARGING METHOD	USB DC Charging
USE TIME	Up to 1 Hour per Charge

BUTTON FUNCTIONS

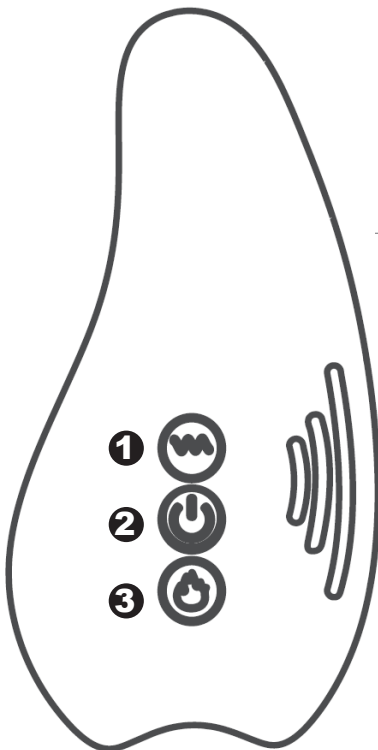

- 1** Vibration Button
 - Press and hold for 2 seconds to activate vibration.
 - Short press to cycle through vibration modes.
 - Press and hold again to turn off.
- 2** Power Button (On/Off)
 - Press and hold for 2 seconds to power on/off.
 - Short press to toggle through available settings.
- 3** Heat Button
 - Short press once for low heat.
 - Press twice to activate medium heat.
 - Press three times to activate high heat.

Please read these instructions carefully before using your lactation massager.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

