


GADNIC

MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR DE OJOS

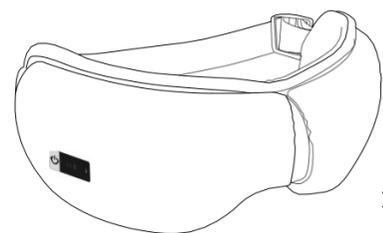

MASAJ180

ÓRDENES DE REGISTRO

1. Precauciones de seguridad	2
2. Perfil del producto	23
3. Confirme el contenido de la mercancía	3
4. Nombre y función de cada parte	4
5. uso del producto	5
6: mantenimiento y almacenamiento	6
7: Fallos y soluciones	7
8. Especificaciones del producto	7

1

Si lleva lentes de contacto, quíteselas antes de utilizar este producto.
Si hay suciedad o cuerpos extraños en la mascarilla, límpiela con un paño húmedo antes de utilizarla para evitar accidentes oculares.
Durante el proceso de carga, no se admite el arranque del producto (la carga se realiza en estado de funcionamiento, el producto inicia el programa de autoprotección y deja de funcionar automáticamente).
No utilice el masajeador ocular mientras camina o conduce. No utilice el masajeador ocular en lugares cálidos y húmedos.

Masajeador de ojos UTILIZA la tecnología de control de chip de microordenador para el control de simulación de toda la naturaleza humana, la aplicación de la presión de aire que es un concepto totalmente nuevo para el cuidado de los ojos, bajo el control de la presión de aire en el ordenador a una gama completa de los músculos alrededor de la presión del ojo, la vibración y junto con la función interna y la función de la calefacción de infrarrojo lejano, el ácido del ojo setinas, el dolor ocular, aliviar la fatiga ocular.

- 1. CARACTERÍSTICAS:**
Dispositivo de masaje ocular se puede conectar al teléfono móvil bluetooth reproducir música; Uso inalámbrico portátil, modo de carga USB; Tecnología de control por chip de microordenador de calefacción por infrarrojos a distancia; 5 técnicas de masaje; Cronometraje automático de 15 minutos; Masaje con bolsas de aire (masaje de los músculos del contorno de los ojos mediante la combinación adecuada de llenado y vaciado de aire); La salida de tensión 5V es más segura, el manejo con una sola tecla es sencillo y cómodo; Nuevo modo de vibración;

2


2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Para los ojos

3. CONTRA INDICACIONES:
Desactiva las lesiones o inflamaciones oculares.
Si hay síntomas de enfermedades de los ojos no se puede utilizar, la aplicación general de la cirugía ocular, glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otras enfermedades oculares importantes pacientes no deben ser utilizados.
Para pacientes con derrame cerebral profundo, hipertensión e hipotensión, consulte primero a un médico profesional. Si siente alguna molestia durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente.
Por favor, evite utilizar el masajeador ocular durante la ingesta de alcohol o en caso de malestar físico

Aparato de masaje ocular, cable de datos, instrucciones



3

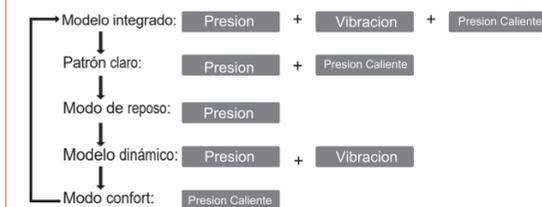

- 1. Funcionamiento con un solo clic**
(1) pulsación larga de la tecla durante 3 segundos para iniciar el modo integral (presión + vibración + compresión de calor)
(2) pulse de nuevo la tecla para iniciar el modo de limpieza (presión de aire + compresión de calor)
(3) siga pulsando la tecla para iniciar el modo de reposo (presión atmosférica)
(4) siga pulsando la tecla para iniciar el modo vitalidad (presión + vibración)
(5) seguir abriendo la llave y empezar a estirar (compresión caliente)
(6) pulse el botón durante 3 segundos para desactivar la función de la máquina
(7) el anfitrión inicia la búsqueda móvil abierta automática por bluetooth Tipo de conexión correspondiente **Nombre Bluetooth:YBY**

Interruptor de control inteligente




4

Modo de empleo

- 1. Preparación antes del uso**
(1) saca el masajeador de ojos con cuidado
(2) colocar el dispositivo de masaje ocular en la posición del ojo
2. Uso (como se muestra)




Bluetooth Presión de aire Vibración por compresión en caliente Pausa/reproducción de música

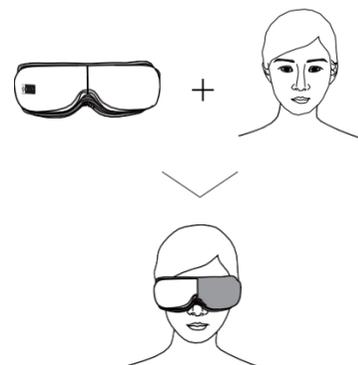

5

Limpeza, almacenamiento y mantenimiento del producto

L. Limpieza y mantenimiento del producto
Si le roban el producto, límpielo con un paño suave y seco. Si está especialmente sucio, puede limpiarlo con alcohol de uso médico.

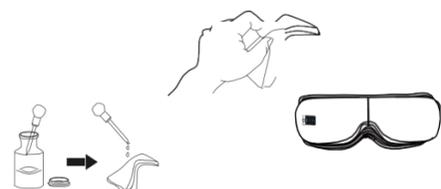

- 2. Mantenga**
Manténgalo seco, ventilado y limpio
Manténgalo fuera del alcance de los niños
No desmonte el motor principal sin permiso

6

No se puede arrancar:

- Si la carga de la batería es demasiado baja, cárguela inmediatamente.
- Protección del host (con electricidad) conecte la carga; cargue, y permita que el host elimine automáticamente la protección (cargue durante 5 segundos)
- La batería no está cargada y el cargador está dañado
- La intensidad de la presión es demasiado débil

Nota: todos los trabajos de mantenimiento debe realizarlas nuestro personal de mantenimiento autorizado

El nombre del producto	Masajes oculares
Cronometraje automático	15 minutos
La tensión nominal	DC 5V
Potencia nominal	3.4W
Adaptador de corriente	AC L00-240V DCSV

7

El fallo	Posible causa del fallo	La solución
No se puede arrancar	Batería baja	Cargar inmediatamente
	Protección de la placa base Con electricidad)	Conecte el cargador para cargar y deje que el host elimine automáticamente la protección (5 segundos después de la carga).
	La batería no está cargada	Sustituir el cargador
	Encargado	Desenchufa el cargador
La presión es demasiado débil	Baja potencia	cargando
Parche ocular no caliente	Baja potencia	cargando
	El modelo es erróneo	Sintoniza el patrón correspondiente



8