

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BOTAS DE PRESOTERAPIA

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)




**AIRCOM8X**

## CARACTERÍSTICAS

A través de cámaras de aire que dan masajes por presión regular, los músculos tensos se relajan y se ejercitan las piernas, además de mejorar su aspecto. Recomendado especialmente para personas que no realizan actividad física con regularidad, como personas mayores o personas que pasan largas horas sentadas.

**3 grupos de funciones 6 modo de masaje**  
Funcionamiento inteligente, intensidad ajustable y fácil manejo

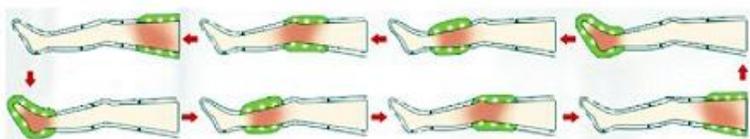

## ESPECIFICACIONES

**Corriente:** AV110V~240V / 50HZ~60HZ

**Funcionamiento:** DC12V / 2A

**Potencia:** 20W

**Categoría:** II

**Aislamiento:** E

**Estándar:** GB4706.10~2008

**Tiempo:** 10 min., 20 min., 30 min.

**⚠ ¡No es producto sanitario!**



## ACCESORIOS




1, Perneras 2, Manguitos 3, Faja abdominal 4, Mangueras de aire



5, Unidad principal 6, Adaptador DC12V 7, Plantillas

## UNIDAD PRINCIPAL

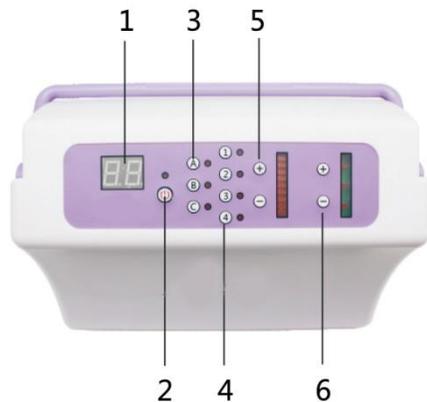


- 1, Indicador de tiempo
- 2, ON/OFF
- 3, Modos A/A+/B/B/C/C+
- 4, Selección de las mangueras
- 5, Configuración de potencia
- 6, Configuración de tiempo

## MONTAJE



Conecte las mangueras a las cámaras como en las imágenes

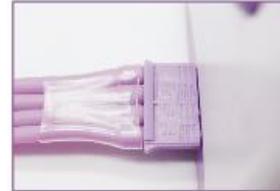

Conecte las mangueras a la unidad principal como en la imagen de la izquierda (los números de cada manguera están indicados en la parte superior)



Conecte el adaptador a la unidad principal (ver imagen de la izquierda).

## FUNCIONES

- \* 9 potencias diferentes.
- \* El nivel de intensidad por defecto es el 5. Puede aumentarlo (+) o disminuirlo (-) con el botón de la izquierda.
- \* El indicador de tiempo LED cuenta el tiempo hacia atrás hasta que el equipo se apaga.
- \* El tiempo que se indica por defecto es 20 minutos. Pasados 20 minutos, el equipo apaga automáticamente. Puede aumentar (+) o disminuir (-) el tiempo con el botón de la derecha.

## FUNCIONAMIENTO



- 1, Pon el masajeador en la parte adecuada del cuerpo.
- 2, Conecte los tubos de aire y los masajeadores correctamente.
- 3, Conecte el adaptador y el controlador correctamente.
- 4, Asegúrese de que el tubo de aire esté funcionando correctamente.
- 5, 6 modos de masaje de operación:
  - A : Todas las luces están encendidas, 1, 2, 3, 4 están infladas en secuencia.
  - A+ : Todas las luces parpadean, 1, 2, 3, 4 se inflan en secuencia, puede detener cualquiera o reiniciarlos nuevamente.
  - B : Todas las luces están encendidas, 1, 2, 3, 4 están simultáneamente infladas, continúan compresión y se simultáneamente desinflan.
  - B+ : Todas las luces parpadean, 1, 2, 3, 4 están simultáneamente infladas, continúe compresión hasta que apague la máquina o cambie a otros modos.
  - C : Todas las luces están encendidas, 1, 2, 3, 4 son simultáneamente infladas, infladas y desinfladas rápidamente 3 veces, y luego desinfladas juntas.
  - C+ : Todas las luces parpadean, 1, 2, 3, 4 se inflan juntas, se inflan y desinflan rápidamente hasta que apague la máquina o cambie a otros modos.
- 6, Se puede seleccionar la potencia (+ -) en cada modo.
- 7, Cuando use solo el abdomen, sugiera usar una intensidad por debajo del nivel 3

## ADVERTENCIAS

- 1, No utilice el enchufe con otros dispositivos.
- 2, Deje de usarlo si no se siente bien durante su uso.
- 3, No utilice otro adaptador diferente al que se provee.
- 4, No desmonte el producto.
- 5, Utilice el producto siguiendo siempre las instrucciones.

## SEGURIDAD

- 1, No utilice la máquina en partes del cuerpo no mencionadas en el manual.
- 2, No utilice la máquina si está utilizando otro producto sanitario.
- 3, No utilice la máquina si sufre alguna enfermedad grave. Consulte con su médico.
- 4, Deje de utilizar la máquina si le resulta incómoda o nota reacciones en la piel.
- 5, Mantenga la máquina alejada de los niños y de personas no responsables de sus actos.
- 6, No utilice la máquina en el baño, en lugares húmedos ni cálidos.
- 7, No utilice la máquina mientras duerme.

**No es producto sanitario !**